



WORK1

Electric Penis Pump

Instructions

Introduction

The MACHO WORK 1 is an automatic penis pump with stepless suction adjustment. To use, place the cylinder over the penis and start on the lowest setting. The indicator light will turn blue at the lowest pressure and red at the highest. Press the "MACHO WORK" button to begin, and press it again to pause once you reach your desired pressure. To release built-up pressure, simply press the "RELEASE" button.

Rechargeable via the included USB cable, the MACHO WORK 1 is not waterproof in the electric section but can be fully disassembled for easy cleaning.

Packing list

- 1 x Penis Pump
- 2 x Seal Rings
- 1 x Charging Cable
- 1 x Instructions

Technical Parameter

- Material: Silicone, ABS, GPPS
- Vacuum Function: Electric
- Maximum Vacuum Pressure: -50kPa
- Working Voltage: 3.7V
- Battery Capacity: 420mAh
- Working Noise: <60dB
- Duration: >60 minutes (full power state)

Button Instruction



1. Long press for 2 seconds to power on/off.
2. Press once to activate or pause the vacuum function.
3. The indicator light changes color with the vacuum pressure intensity. (Blue indicates the starting level, red indicates the highest level.)



Hold this button to release the pressure.

Instructions for Use

1. Before using the product for the first time, please charge it. Please insert the provided USB charging cable correctly into the charging port of the product. Then you can charge the product using a computer USB interface or a mobile charger with a USB interface. During normal charging, the product indicator light flashes to indicate charging; when the battery is fully charged, the indicator light stays on continuously.
2. Apply water-based lubricant to the entrance of the penis or sealing ring.
3. Insert the flaccid penis into the vacuum pump through the sealing ring entrance.
4. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. Press once again to activate the vacuum function.
5. The vacuum will begin, which may be accompanied by a mild pulling sensation.

6. Once the penis is erect, immediately press the button to stop the vacuum, then press and hold the release button to discharge the pressure.
7. If you experience pain or discomfort, immediately press and hold the release button to discharge the pressure and stop using the device.



Cleaning and Maintenance

1. Before and after each use, clean the sealing ring with warm water and antibacterial soap.
2. Gently wipe off moisture with a dry towel and allow it to air dry naturally.
3. The device is not waterproof. Do not allow water to seep into the electric device.
4. Only use water-based lubricants. Do not use silicone-based lubricants.
5. Store in a clean, cool place, and keep out of reach of children.
6. When cleaning the device, unscrew the electric device and clean the cylinder and sealing ring.

Health and Safety Precautions

- The device cannot be operated while charging. Do not power on the device during charging.
- Only apply the minimum vacuum pressure necessary for achieving an erection. Excessive use may cause injury to the penis.
- If you experience pain, stop using the vacuum pump immediately.
- Do not use under the influence of alcohol or drugs, as they may impair your judgment and increase the risk of injury to the penis.
- If you have sickle cell anemia, a history of prolonged erections, or are taking large amounts of aspirin or other blood thinners, do not use the device to avoid increasing the risk of bruising and hematomas.
- The use of this device may cause abrasions or damage to the blood vessels in the penis or scrotum, leading to bruising, bleeding, or hematomas.
- The device may worsen existing conditions such as Peyronie's disease (formation of hardened tissue in the penis, typically causing pain, bending, and twisting during an erection), abnormal erections (persistent, often painful erections unrelated to sexual arousal), or urethral stricture (narrowing of the urethra, which can cause difficulty urinating).
- Incorrect use of the vacuum pump can cause damage to the penis.
- If you experience erectile dysfunction, such as the inability to achieve an erection sufficient for intercourse, consult your doctor before using this device to avoid harmful delays in diagnosing common underlying causes, such as diabetes, multiple sclerosis, cirrhosis, chronic kidney failure, or alcoholism.
- Do not use the product if you experience pain in the penis area.
- If you have reduced hand strength and cannot properly operate the product, do not use it.

Sketch Map

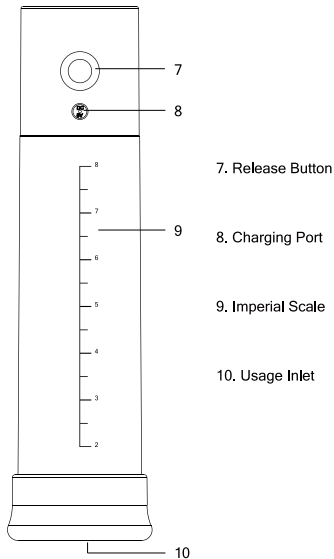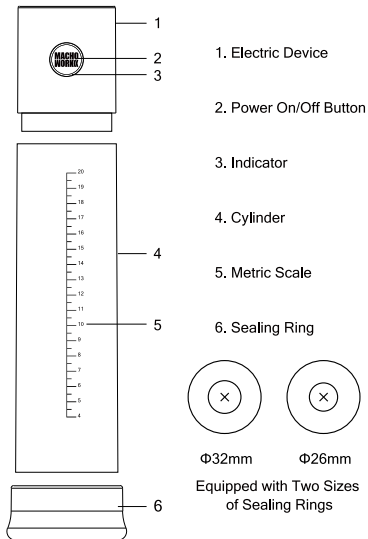

Introduction

Le MACHO WORK 1 est une pompe à pénis automatique avec réglage de la succion sans paliers. Pour l'utiliser, placez le cylindre sur le pénis et commencez au réglage le plus bas. Le voyant devient bleu à la pression la plus basse et rouge à la pression la plus élevée. Appuyez sur le bouton "MACHO WORK" pour commencer, et appuyez à nouveau pour faire une pause une fois la pression désirée atteinte. Pour libérer la pression accumulée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "RELEASE".

Rechargeable via le câble USB inclus, le MACHO WORK 1 n'est pas étanche dans la partie électrique, mais il peut être complètement démonté pour un nettoyage facile.

Liste de colisage

- 1 x Pompe pénienne
- 2 x Anneaux d'étanchéité
- 1 x Câble de charge
- 1 x Instructions

Caractéristiques techniques

Matériaux : Silicone, ABS, GPPS
Fonction de vide : Électrique
Pression de vide maximale : -50 kPa
Tension de travail : 3,7 V
Capacité de la batterie : 420 mAh
Bruit : <60 dB
Durée : > 60 minutes (sous charge complète)

Instruction du bouton



1. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
2. Appuyez une fois pour activer ou mettre en pause la fonction de vide.
3. Le voyant change de couleur en fonction de l'intensité de la pression du vide. (Le bleu indique le niveau de départ, le rouge indique le niveau maximum.)



Maintenez ce bouton enfoncé pour libérer la pression.

Mode d'emploi

1. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez le charger. Veuillez insérer correctement le câble de chargement USB fourni dans le port de chargement du produit. Ensuite, vous pouvez charger le produit à l'aide d'une interface USB d'ordinateur ou d'un chargeur mobile avec une interface USB. Pendant la charge normale, le voyant lumineux du produit clignote pour indiquer la charge; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux reste allumé en continu.
2. Appliquez un lubrifiant à base d'eau à l'entrée du pénis ou de l'anneau de scellement.
3. Insérez le pénis flasque dans le stimulateur à vide par l'entrée de l'anneau de scellement.
4. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez une nouvelle fois pour activer la fonction de vide.

5. Le vide commencera, ce qui peut être accompagné d'une légère sensation de traction.
6. Lorsque le pénis est érigé, appuyez immédiatement sur le bouton pour arrêter l'aspiration, puis appuyez et maintenez le bouton de libération pour décharger la pression.
7. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, appuyez immédiatement sur le bouton de libération pour décharger la pression et arrêtez l'utilisation.

Nettoyage et Entretien


1. Avant et après chaque utilisation, nettoyez l'anneau de scellement avec de l'eau tiède et du savon antibactérien.
2. Essuyez délicatement l'humidité avec une serviette sèche et laissez sécher à l'air libre.
3. L'appareil n'est pas étanche. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil électrique.
4. Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone.
5. Conservez-le dans un endroit propre et frais, à l'abri des enfants.
6. Lorsque vous nettoyez l'appareil, dévissez l'appareil électrique et nettoyez le cylindre et l'anneau de scellement.

Précautions de Santé et de Sécurité

- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge. Ne pas allumer l'appareil pendant la charge.
- N'appliquez que la pression de vide minimale nécessaire pour obtenir une érection. Une utilisation excessive peut entraîner des blessures au pénis.

- En cas de douleur, cessez immédiatement d'utiliser le dispositif de pompe à vide.
- Ne pas utiliser sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car cela peut altérer votre jugement et augmenter le risque de blessure au pénis.
- Si vous souffrez d'anémie falciforme, d'érections prolongées, ou si vous prenez de grandes quantités d'aspirine ou d'autres anticoagulants, ne pas utiliser l'appareil pour éviter d'augmenter le risque de contusions et d'hématomes.
- L'utilisation de cet appareil peut provoquer des abrasions ou des dommages aux vaisseaux sanguins du pénis ou du scrotum, entraînant des ecchymoses, des saignements ou des hématomes.
- L'appareil peut aggraver des conditions existantes telles que la maladie de Peyronie (formation de tissu durci dans le pénis, généralement causante de douleur, de courbure et de torsion pendant l'érection), des érections anormales (érection persistante et douloureuse, sans lien avec l'excitation sexuelle) ou des rétrécissements de l'urètre (rétrécissement de l'urètre, ce qui peut causer des difficultés urinaires).
- Une mauvaise utilisation de la pompe à vide peut endommager le pénis.
- Si vous souffrez de dysfonction érectile, comme l'incapacité de réaliser une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil pour éviter un retard nuisible dans le diagnostic des causes sous-jacentes courantes, telles que le diabète, la sclérose en plaques, la cirrhose, l'insuffisance rénale chronique ou l'alcoolisme.
- Ne pas utiliser le produit si vous ressentez de la douleur dans la région du pénis.
- Si vous avez une force manuelle réduite et ne pouvez pas manipuler correctement l'appareil, ne l'utilisez pas.

Carte schématique

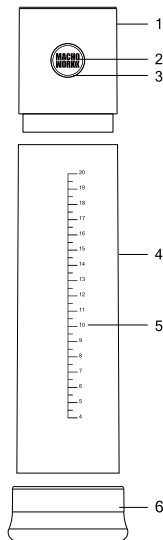

1. Dispositif électrique



2. Bouton marche/arrêt

3. Témoign Lumineux

4. Cylindre

5. Échelle métrique

6. Anneau d'étanchéité

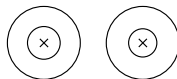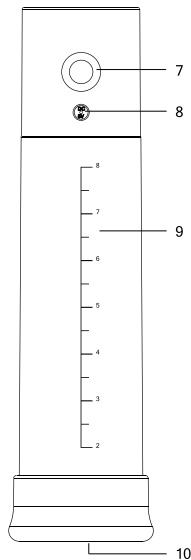 $\Phi 32\text{mm}$ $\Phi 26\text{mm}$ Équipé de deux tailles
d'anneaux d'étanchéité

7. Bouton de libération

8. Prise de charge

9. Échelle impériale

10. Entrée d'utilisation

Einführung

Der MACHO WORK 1 ist eine automatische Penis-Pumpe mit stufenloser Saugkraftregulierung. Um ihn zu verwenden, setzen Sie den Zylinder über den Penis und beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe. Die Anzeigelampe wird bei niedrigstem Druck blau und bei höchstem Druck rot. Drücken Sie die "MACHO WORK"-Taste, um zu starten, und drücken Sie sie erneut, um zu pausieren, sobald der gewünschte Druck erreicht ist. Drücken Sie die "RELEASE"-Taste, um den aufgebauten Druck abzulassen.

Der MACHO WORK 1 ist über das mitgelieferte USB-Kabel aufladbar. Der elektrische Teil ist nicht wasserdicht, aber die Pumpe kann vollständig zerlegt werden, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.

Packliste

- 1 x Penis-Pumpe
- 2 x Dichtungsringe
- 1 x Ladekabel
- 1 x Anleitung

Technische Parameter

Materialien: Silikon, ABS, GPPS

Vakuumpumpe: Elektrisch

Maximaler Vakuumdruck: -50 kPa

Arbeitsspannung: 3,7 V

Batteriekapazität: 420 mAh

Geräusch:<60dB

Dauer: >60 Minuten (bei voller Ladung)

Tastenanweisung



1. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie einmal, um die Vakuumpumpe zu aktivieren oder zu pausieren.
3. Die Anzeigelampe ändert die Farbe je nach Intensität des Vakuumdrucks. (Blau zeigt das Startniveau an, rot das höchste Niveau.)



Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Druck abzulassen.

Gebrauchsanweisung

1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte auf. Bitte stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel korrekt in den Ladeanschluss des Produkts. Anschließend können Sie das Produkt mit einer USB-Schnittstelle des Computers oder einem Mobiltelefonladegerät mit einer USB-Schnittstelle aufladen. Während des normalen Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe des Produkts, um das Laden anzuzeigen; wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt die Anzeigelampe kontinuierlich eingeschaltet.
2. Tragen Sie wasserbasiertes Gleitmittel am Eingang des Penis oder des Dichtungsringes auf.
3. Führen Sie den schlaffen Penis durch den Eingang des Dichtungsringes in das Vakuumgerät ein.
4. Halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Vakuumpumpe zu aktivieren.
5. Der Vakuum wird beginnen, was mit einem leichten Ziehgefühl verbunden sein kann.

6. Wenn der Penis erigiert ist, drücken Sie sofort den Knopf, um das Vakuum zu stoppen, und halten Sie dann den Freigabeknopf gedrückt, um den Druck abzulassen.
7. Wenn Sie Schmerzen oder Unannehmlichkeiten verspüren, drücken Sie sofort den Freigabeknopf, um den Druck abzulassen und hören Sie auf, das Gerät zu benutzen.

Reinigung und Pflege


1. Reinigen Sie den Dichtungsring vor und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und antibakterieller Seife.
2. Tupfen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Handtuch ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.
3. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Lassen Sie kein Wasser in das elektrische Gerät eindringen.
4. Verwenden Sie nur wasserbasierte Gleitmittel. Verwenden Sie keine silikonbasierten Gleitmittel.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, kühlen Ort auf und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
6. Wenn das Gerät gereinigt werden muss, schrauben Sie das elektrische Gerät ab und reinigen Sie den Zylinder und den Dichtungsring.

Gesundheits-und Sicherheitsvorkehrungen

- Das Gerät darf nicht während des Ladevorgangs betrieben werden. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.
- Wenden Sie nur den minimalen Vakuumdruck an, der für eine Erektion erforderlich ist. Übermäßige Anwendung kann zu Verletzungen des Penis führen.
- Bei Schmerzen sofort die Verwendung der Vakuumpumpe einstellen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, da diese Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen und das Risiko von Verletzungen des Penis erhöhen können.
- Wenn Sie an Sichelzellenanämie, einer Geschichte von langanhaltenden Erektionen leiden oder große Mengen Aspirin oder andere Blutverdünner einnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht, um das Risiko von Blutergüssen und Hämatomen zu erhöhen.
- Die Verwendung dieses Geräts kann Abschürfungen oder Schäden an den Blutgefäßen im Penis oder Skrotum verursachen, was zu Blutergüssen, Blutungen oder Hämatomen führen kann.
- Das Gerät kann bestehende Erkrankungen wie die Peyronie-Krankheit (Bildung von verhärtetem Gewebe im Penis, die zu Schmerzen, Krümmung und Verdrehung bei der Erektion führen kann), anormale Erektionen (anhaltende, schmerzhafte Erektionen ohne sexuelle Erregung) oder Harnröhrenverengung (Verengung der Harnröhre, die das Wasserlassen erschwert) verschlechtern.
- Eine falsche Verwendung der Vakuumpumpe kann den Penis schädigen.
- Wenn Sie unter erektiler Dysfunktion leiden, z. B. wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Erektion zu erreichen, die für den Geschlechtsverkehr ausreicht, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, um schädliche Verzögerungen bei der Diagnose häufiger zugrunde liegender Ursachen wie Diabetes, Multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronisches Nierenversagen oder Alkoholismus zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schmerzen im Penisbereich haben.
- Wenn Ihre Handkraft reduziert ist und Sie das Gerät nicht richtig bedienen können, verwenden Sie es nicht.


Skizzenkarte

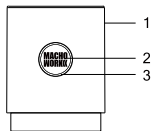

1. Elektronisches Gerät

2. Ein/Aus-Schalter




3. Anzeigeleuchte

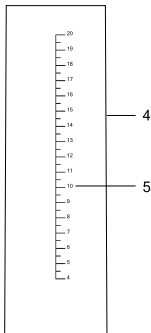

4. Zylinder


5. Metrische Skala

6. Dichtung

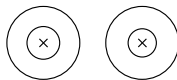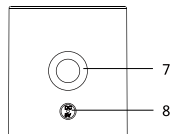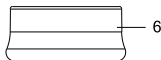 $\Phi 32\text{mm}$ $\Phi 26\text{mm}$ Ausgestattet mit zwei Größen
von Dichtungsringen


7. Freigabeknopf

8. Ladeanschluss

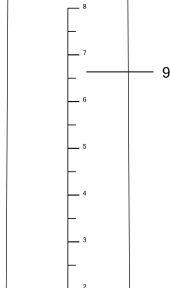

9. Imperiale Skala

10. Benutzungseingang

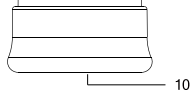

Introducción

El MACHO WORK 1 es una bomba automática para el pene con ajuste de succión sin escalas. Para usarla, coloque el cilindro sobre el pene y comience en el ajuste más bajo. La luz indicadora será azul en la presión más baja y roja en la más alta. Presione el botón "MACHO WORK" para comenzar, y presione nuevamente para pausar una vez que haya alcanzado la presión deseada. Para liberar la presión acumulada, simplemente presione el botón "RELEASE".

Recargable a través del cable USB incluido, el MACHO WORK 1 no es resistente al agua en la sección eléctrica, pero se puede desmontar por completo para una fácil limpieza.

Lista de embalaje

- 1 x Bomba peneana
- 2 x Anillos de sellado
- 1 x Cable de carga
- 1 x Instrucciones

Parámetros técnicos

Materiales: Silicona, ABS, GPPS

Función de vacío: Eléctrico

Presión máxima de vacío: -50 kPa

Voltaje de trabajo: 3,7 V

Capacidad de la batería: 420 mAh

Ruido: <60 dB

Duración: > 60 minutos (bajo carga completa)

Instrucción del botón



1. Mantén pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.
2. Presione una vez para activar o poner en pausa la función de vacío.
3. La luz indicadora cambia de color según la intensidad de la presión de vacío. (El azul indica el nivel de inicio, el rojo indica el nivel máximo.)



Mantenga presionado este botón para liberar la presión.

Instrucciones de Uso

1. Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor cárguelo. Inserte el cable de carga USB proporcionado correctamente en el puerto de carga del producto. Luego, puede cargar el producto utilizando una interfaz USB de la computadora o un cargador móvil con una interfaz USB. Durante la carga normal, el indicador luminoso del producto parpadea para indicar la carga; cuando la batería está completamente cargada, el indicador luminoso permanece encendido continuamente.
2. Aplique lubricante a base de agua en la entrada del pene o del anillo de sellado.
3. Inserte el pene flácido a través de la entrada del anillo de sellado en el dispositivo de vacío.
4. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. Presione nuevamente para activar la función de vacío.

5. El vacío comenzará, lo que puede ir acompañado de una ligera sensación de tirón.
6. Una vez que el pene esté erecto, presione inmediatamente el botón para detener la succión, luego presione y mantenga el botón de liberación para liberar la presión.
7. Si experimenta dolor o incomodidad, presione inmediatamente el botón de liberación para liberar la presión y deje de usar el dispositivo.


Limpieza y Mantenimiento

1. Antes y después de cada uso, limpie el anillo de sellado con agua tibia y jabón antibacterial.
2. Seque suavemente la humedad con una toalla seca y deje que se seque al aire naturalmente.
3. El dispositivo no es resistente al agua. No permita que el agua entre en el dispositivo eléctrico.
4. Solo use lubricantes a base de agua. No use lubricantes a base de silicona.
5. Almacene en un lugar limpio y fresco, fuera del alcance de los niños.
6. Cuando necesite limpiar el dispositivo, desenrosque el dispositivo eléctrico y limpie el cilindro y el anillo de sellado.

Precauciones de salud y seguridad

- El dispositivo no puede ser operado mientras se está cargando. No encienda el dispositivo durante la carga.
- Aplique solo la presión mínima de vacío necesaria para lograr una erección. El uso excesivo puede causar lesiones en el pene.
- Si experimenta dolor, deje de usar la bomba de vacío inmediatamente.
- No use bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que pueden alterar su juicio y aumentar el riesgo de lesiones en el pene.
- Si tiene anemia falciforme, un historial de erecciones prolongadas o está tomando grandes cantidades de aspirina o otros anticoagulantes, no use el dispositivo para evitar aumentar el riesgo de moretones y hematomas.
- El uso de este dispositivo puede causar abrasiones o daños a los vasos sanguíneos en el pene o el escroto, lo que puede causar moretones, sangrados o hematomas.
- El dispositivo puede empeorar condiciones existentes como la enfermedad de Peyronie (formación de tejido endurecido en el pene, generalmente causando dolor, curvatura y torsión durante la erección), erecciones anormales (erecciones persistentes y dolorosas que no están relacionadas con la excitación sexual) o estrechamiento de la uretra (estrechamiento de la uretra que puede dificultar la micción).
- El uso incorrecto de la bomba de vacío puede dañar el pene.
- Si tiene disfunción eréctil, como la incapacidad de lograr una erección suficiente para el acto sexual, consulte a su médico antes de usar este dispositivo para evitar retrasos perjudiciales en el diagnóstico de causas subyacentes comunes, como diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis, insuficiencia renal crónica o alcoholismo.
- No use el producto si siente dolor en la zona del pene.
- Si tiene poca fuerza en las manos y no puede operar correctamente el producto, no lo use.

Mapa esquemático

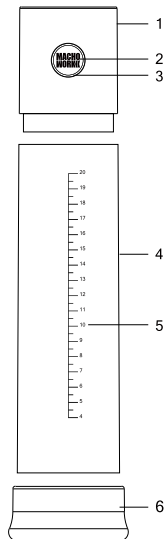

1. Dispositivo eléctrico


2. Botón de encendido/
apagado

3. Indicador

4. Cilindro

5. Escala métrica


6. Anillo de sellado

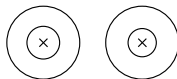

Φ32mm

Φ26mm

Equipado con dos tamaños
de anillos de sellado

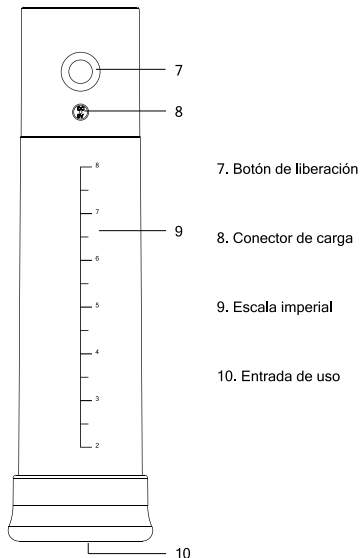

7. Botón de liberación

8. Conector de carga

9. Escala imperial

10. Entrada de uso

Introduzione

Il MACHO WORK 1 è una pompa automatica per il pene con regolazione del vuoto senza scatti. Per utilizzarlo, posiziona il cilindro sul pene e inizia con la regolazione più bassa. La luce indicatrice sarà blu alla pressione più bassa e rossa alla massima. Premi il tasto "MACHO WORK" per iniziare, e premi di nuovo per mettere in pausa una volta raggiunta la pressione desiderata. Per rilasciare la pressione accumulata, basta premere il tasto "RELEASE".

Ricaricabile tramite il cavo USB incluso, il MACHO WORK 1 non è impermeabile nella parte elettrica, ma può essere completamente smontato per una facile pulizia.

Lista imballaggio

- 1 x Pompa peniena
- 2 x Anelli di tenuta
- 1 x Cavo di ricarica
- 1 x Istruzioni

Parametri tecnici

Materiali: Silicone, ABS, GPPS

Funzione di vuoto: Elettrica

Pressione massima del vuoto: -50 kPa

Tensione di lavoro: 3,7 V

Capacità della batteria: 420 mAh

Rumore: <60 dB

Durata: >60 minuti (sotto carica completa)

Istruzione del pulsante



1. Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere.
2. Premere una volta per attivare o mettere in pausa la funzione di vuoto.
3. La luce indicatore cambia colore in base all'intensità della pressione del vuoto. (Il blu indica il livello di partenza, il rosso indica il livello massimo.)



Tieni premuto questo pulsante per rilasciare la pressione.

Istruzioni per l'Uso

1. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, per favore caricalo. Inserisci correttamente il cavo di ricarica USB fornito nella porta di ricarica del prodotto. Quindi puoi caricare il prodotto utilizzando un'interfaccia USB del computer o un caricabatterie mobile con un'interfaccia USB. Durante la normale ricarica, il indicatore luminoso del prodotto lampeggia per indicare la ricarica; quando la batteria è completamente carica, il indicatore luminoso rimane acceso continuamente.
2. Applica un lubrificante a base d'acqua sull'ingresso del pene o dell'anello di tenuta.
3. Inserisci il pene flaccido nell'apparecchio per il vuoto attraverso l'ingresso dell'anello di tenuta.
4. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Premi una volta di nuovo per attivare la funzione di vuoto.

5. Il vuoto inizierà, il che può essere accompagnato da una leggera sensazione di trazione.
6. Una volta che il pene è eretto, premi immediatamente il pulsante per fermare la suzione, quindi tieni premuto il pulsante di rilascio per scaricare la pressione.
7. Se avverti dolore o fastidio, premi immediatamente il pulsante di rilascio per scaricare la pressione e interrompi l'uso del dispositivo.


Pulizia e Manutenzione

1. Prima e dopo ogni utilizzo, pulire l'anello di tenuta con acqua calda e sapone antibatterico.
2. Asciugare delicatamente l'umidità con un asciugamano asciutto e lasciare asciugare all'aria.
3. Il dispositivo non è impermeabile. Non consentire che l'acqua entri nell'apparecchio elettrico.
4. Utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua. Non usare lubrificanti a base di silicone.
5. Conservare in un luogo pulito e fresco, fuori dalla portata dei bambini.
6. Quando il dispositivo deve essere pulito, svitare il dispositivo elettrico e pulire il cilindro e l'anello di tenuta.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

- Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica. Non accendere il dispositivo durante la ricarica.
- Applicare solo la pressione del vuoto minima necessaria per ottenere un'erezione. L'uso eccessivo potrebbe danneggiare il pene.
- Se avverti dolore, interrompi immediatamente l'uso della pompa a vuoto.
- Non utilizzare sotto l'influenza di alcol o farmaci, poiché potrebbe compromettere il giudizio e aumentare il rischio di lesioni al pene.
- Se soffri di anemia falciforme, hai una storia di erezioni prolungate, o stai assumendo grandi quantità di aspirina o altri anticoagulanti, non utilizzare il dispositivo per evitare di aumentare il rischio di lividi e ematomi.
- L'uso di questo dispositivo potrebbe causare abrasioni o danni ai vasi sanguigni nel pene o nello scroto, provocando lividi, emorragie o ematomi.
- L'uso di questo dispositivo potrebbe peggiorare condizioni preesistenti come la malattia di Peyronie (formazione di tessuti induriti nel pene, solitamente causando dolore, curvatura e torsione durante l'erezione), erezioni anomale (persistenti, di solito dolorose, non legate alla stimolazione sessuale) o stenosi dell'uretra (restringimento dell'uretra che può causare difficoltà nella minzione).
- Un uso scorretto della pompa a vuoto può danneggiare il pene.
- Se soffri di disfunzione erettile, come l'incapacità di raggiungere un'erezione sufficiente per il rapporto sessuale, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo dispositivo per evitare ritardi dannosi nella diagnosi delle cause comuni di questa condizione, come diabete, sclerosi multipla, cirrosi, insufficienza renale cronica o alcolismo.
- Non utilizzare il prodotto se avverti dolore nell'area del pene.
- Se hai ridotta forza nelle mani e non riesci a manovrare correttamente il prodotto, non usarlo.

Mappa schematica

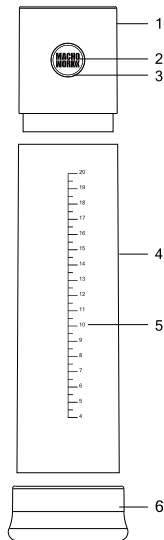

1. Dispositivo elettrico


2. Pulsante di accensione/
spegnimento

3. Indicatore

4. Cilindro

5. Scala metrico

6. Anello di tenuta

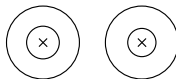

$\Phi 32\text{mm}$

$\Phi 26\text{mm}$

Dotato di due misure
di anelli di tenuta



7. Pulsante di rilascio

8. Presa di ricarica

9. Scala imperiale

10. Ingresso d'uso

Introdução

O MACHO WORK 1 é uma bomba automática para o pênis com ajuste de sucção sem etapas. Para usá-la, coloque o cilindro sobre o pênis e comece na configuração mais baixa. A luz indicadora ficará azul na menor pressão e vermelha na maior. Pressione o botão "MACHO WORK" para começar e pressione novamente para pausar assim que atingir a pressão desejada. Para liberar a pressão acumulada, basta pressionar o botão "RELEASE".

Recarregável através do cabo USB incluído, o MACHO WORK 1 não é à prova d'água na parte elétrica, mas pode ser totalmente desmontado para fácil limpeza.

Lista de embalagem

- 1 x Bomba peniana
- 2 x Anéis de vedação
- 1 x Cabo de Carregamento
- 1 x Instruções

Parâmetros técnicos

Matériaux : Silicone, ABS, GPPS

Função de vácuo: Elétrica

Pressão máxima de vácuo: -50 kPa

Tensão de trabalho: 3,7 V

Capacidade da bateria: 420 mAh

Ruído: <60 dB

Duração: > 60 minutos (sob carga completa)

Instrução do botão



1. Mantenha pressionado por 2 segundos para ligar/ desligar.
2. Pressione uma vez para ativar ou pausar a função de vácuo.
3. A luz indicadora muda de cor de acordo com a intensidade da pressão do vácuo. (O azul indica o nível inicial, o vermelho indica o nível mais alto.)



Mantenha pressionado este botão para liberar a pressão.

Instruções de Uso

1. Antes de usar o produto pela primeira vez, por favor, carregue-o. Insira corretamente o cabo de carregamento USB fornecido na porta de carregamento do produto. Em seguida, você pode carregar o produto usando uma interface USB do computador ou um carregador móvel com interface USB. Durante o carregamento normal, o indicador luminoso do produto pisca para indicar o carregamento; quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador luminoso permanece aceso continuamente.
2. Aplique lubrificante à base de água na entrada do pênis ou do anel de vedação.
3. Insira o pênis flácido na bomba a vácuo através da entrada do anel de vedação.
4. Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar o dispositivo. Pressione novamente para ativar a função de vácuo.

5. O vácuo começará, o que pode ser acompanhado por uma leve sensação de puxão.
6. Quando o pênis estiver ereto, pressione imediatamente o botão para parar a sucção, depois pressione e segure o botão de liberação para liberar a pressão.
7. Se sentir dor ou desconforto, pressione imediatamente o botão de liberação para liberar a pressão e pare de usar o dispositivo.


Limpeza e Manutenção

1. Antes e depois de cada uso, limpe o anel de vedação com água morna e sabão antibacteriano.
2. Seque suavemente a umidade com uma toalha seca e deixe secar ao ar livre naturalmente.
3. O dispositivo não é à prova d'água. Não permita que a água entre no dispositivo elétrico.
4. Use apenas lubrificantes à base de água. Não use lubrificantes à base de silicone.
5. Armazene em um local limpo e fresco, fora do alcance das crianças.
6. Quando precisar limpar o dispositivo, desparafuse o dispositivo elétrico e limpe o cilindro e o anel de vedação.


Precauções de saúde e segurança

- O dispositivo não pode ser operado enquanto estiver carregando. Não ligue o dispositivo durante o carregamento.
- Aplique apenas a pressão de vácuo mínima necessária para alcançar uma ereção. O uso excessivo pode causar lesões no pênis.
- Se sentir dor, pare de usar a bomba a vácuo imediatamente.
- Não use sob a influência de álcool ou drogas, pois isso pode prejudicar seu julgamento e aumentar o risco de lesões no pênis.
- Se você tem anemia falciforme, histórico de ereções prolongadas ou está tomando grandes quantidades de aspirina ou outros anticoagulantes, não use o dispositivo para evitar aumentar o risco de hematomas e contusões.
- O uso deste dispositivo pode causar arranhões ou danos aos vasos sanguíneos no pênis ou escroto, resultando em hematomas, sangramentos ou hematomas.
- O dispositivo pode agravar condições existentes, como a doença de Peyronie (formação de tecido endurecido no pênis, geralmente causando dor, curvatura e torção durante a ereção), ereções anormais (ereções persistentes e dolorosas, não relacionadas à excitação sexual) ou estreitamento da uretra (estreitamento da uretra, que pode dificultar a micção).
- O uso incorreto da bomba a vácuo pode causar danos ao pênis.
- Se você tiver disfunção erétil, como a incapacidade de alcançar uma ereção suficiente para a relação sexual, consulte seu médico antes de usar este dispositivo para evitar atrasos prejudiciais no diagnóstico de causas subjacentes comuns, como diabetes, esclerose múltipla, cirrose, insuficiência renal crônica ou alcoolismo.
- Não use o produto se sentir dor na área do pênis.
- Se você tiver força reduzida nas mãos e não puder operar corretamente o produto, não o use.


Mapa esquemático

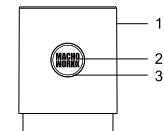

- 1. Dispositivo elétrico
- 2. Botão de ligar/desligar
- 3. Indicador

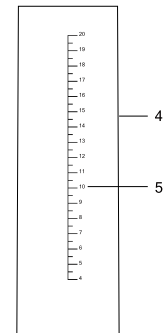



- 4. Cilindro
- 5. Escala métrica
- 6. Anel de vedação

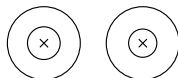

Φ32mm

Φ26mm

Equipado com dois tamanhos
de anéis de vedação

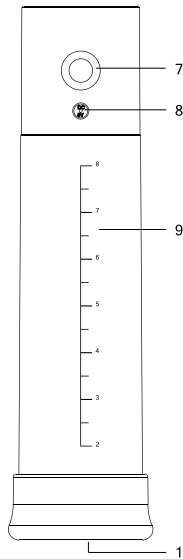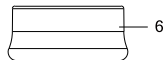

- 7. Botão de liberação
- 8. Tomada de carregamento
- 9. Escala imperial
- 10. Entrada de uso

Введение

MACHO WORK 1 — это автоматический насос для пениса с бесступенчатой регулировкой всасывания. Для использования поместите цилиндр на пенис и начните с самого низкого уровня. Индикаторный светильник будет синим при низком давлении и красным при высоком. Нажмите кнопку "MACHO WORK", чтобы начать, и снова нажмите для паузы, когда достигнете желаемого давления. Чтобы сбросить накопленное давление, просто нажмите кнопку "RELEASE".

MACHO WORK 1 можно заряжать с помощью прилагаемого USB-кабеля. Электрическая часть не водонепроницаема, но насос можно полностью разобрать для легкой очистки.

Список комплектации

- 1 x Пенис-помпа
- 2 x Уплотнительные кольца
- 1 x Кабель для зарядки
- 1 x Инструкция

Технические параметры

Материалы: силикон, ABS, GPPS

Функция вакуума: Электрическая

Максимальное вакуумное давление: -50 кПа

Рабочее напряжение: 3,7 В

Емкость батареи: 420 мАч

Шум: <60 дБ

Продолжительность работы: > 60 минут (при полной зарядке)

Инструкция по кнопке



1. Удерживайте 2 секунды, чтобы включить/выключить.
2. Нажмите один раз, чтобы активировать или приостановить функцию вакуума.
3. Индикатор изменяет цвет в зависимости от интенсивности вакуумного давления. (Синий указывает начальный уровень, красный указывает на максимальный уровень.)



Удерживайте эту кнопку, чтобы сбросить давление.

Инструкции по использованию

1. Перед первым использованием продукта, пожалуйста, зарядите его. Вставьте предоставленный USB-кабель для зарядки в разъем зарядки продукта. Затем вы можете заряжать продукт с использованием USB-интерфейса компьютера или мобильного зарядного устройства с USB-интерфейсом. Во время нормальной зарядки индикатор продукта мигает для указания зарядки; когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор остается постоянно включенным.
2. Нанесите водорастворимую смазку на вход в пенис или уплотнительное кольцо.
3. Вставьте незарегистрированный пенис через вход уплотнительного кольца в вакуумный насос.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Нажмите снова, чтобы активировать функцию вакуума.
5. Вакуум начнется, что может сопровождаться легким тянущим ощущением.

6. Как только пенис станет эрегированным, немедленно нажмите кнопку для остановки вакуума, затем нажмите и удерживайте кнопку сброса для освобождения давления.
7. Если вы испытываете боль или дискомфорт, немедленно нажмите кнопку сброса для освобождения давления и прекратите использование устройства.

Очистка и обслуживание


1. Перед и после каждого использования очистите уплотнительное кольцо теплой водой и антибактериальным мылом.
2. Аккуратно вытрите влагу сухим полотенцем и оставьте высохнуть на воздухе.
3. Устройство не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды в электрическое устройство.
4. Используйте только смазки на водной основе. Не используйте силиконовые смазки.
5. Храните устройство в чистом, прохладном месте, вдали от детей.
6. Когда нужно очистить устройство, открутите электрическое устройство и очистите цилиндр и уплотнительное кольцо.

Меры предосторожности в области здоровья и безопасности

- Устройство не может быть использовано во время зарядки. Не включайте устройство во время зарядки.
- Применяйте только минимальное вакуумное давление, необходимое для достижения эрекции. Чрезмерное использование может вызвать травмы пениса.
- Если вы испытываете боль, немедленно прекратите использование вакуумного насоса.

- Не используйте устройство под воздействием алкоголя или наркотиков, так как это может повлиять на ваше суждение и увеличить риск травмирования пениса.
- Если у вас анемия серповидных клеток, история продолжительных эрекций или вы принимаете большие дозы аспирина или других разжижителей крови, не используйте устройство, чтобы избежать увеличения риска синяков и гематом.
- Использование устройства может вызвать царапины или повреждения сосудов в пенисе или мошонке, что приведет к синякам, кровотечению или гематомам.
- Устройство может усугубить существующие заболевания, такие как болезнь Пейрони (образование уплотненной ткани в пенисе, обычно вызывающее боль, изгиб и перекос при эрекции), аномальные эрекции (постоянные болезненные эрекции, не связанные с сексуальным возбуждением) или сужение уретры (сужение уретры, что может вызвать затруднения при мочеиспускании).
- Неправильное использование вакуумного насоса может повредить пенис.
- Если у вас есть симптомы эректильной дисфункции, такие как неспособность достичь эрекции, достаточной для полового акта, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, чтобы избежать вредных задержек в диагностике распространенных причин, таких как диабет, рассеянный склероз, цирроз, хроническая почечная недостаточность или алкоголизм.
- Не используйте продукт, если вы испытываете боль в области пениса.
- Если у вас ослаблены руки и вы не можете правильно управлять продуктом, не используйте его.

Эскиз карты

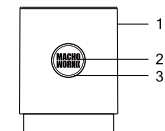

1. Электрическое устройство

2. Кнопка включения / выключения

3. Индикатор

4. Цилиндр

5. Метрическая шкала

6. Уплотнительное кольцо






Φ32mm



Φ26mm

Оснащен двумя размерами уплотнительных колец

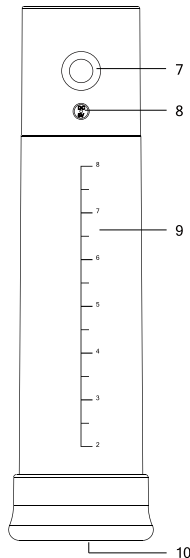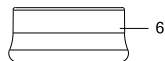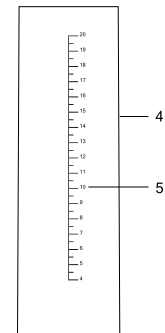

7. Кнопка сброса

8. Разъем для зарядки

9. Имперская шкала

10. Вход использования

はじめに

MACHO WORK 1は、無段階吸引調整機能を備えた自動ペニスポンプです。使用するには、シリンダーをペニスにかぶせ、最も低い設定から始めます。インジケータライトは、最も低い圧力で青色、最も高い圧力で赤色になります。"MACHO WORK" ボタンを押して使用を開始し、希望の圧力に達したら再度押して一時停止します。蓄積された圧力を解放するには、"RELEASE" ボタンを押します。

付属のUSBケーブルで充電可能なMACHO WORK 1は、電気部分が防水ではありませんが、完全に分解して簡単に清掃できます。

梱包リスト

- 1 x ペニスポンプ
- 2 x シールリング
- 1 x 充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

技術仕様

- 材質:シリコン、ABS、GPPS
真空機能:電動
最大真空圧力:-50 kPa
動作電圧:3.7V
バッテリー容量:420mAh
騒音:<60dB
持続時間:> 60分(完全充電時)

ボタンの説明



1. 2秒間押し続けて電源をオン/オフします。
2. 1回押すと、真空機能が開始または一時停止します。
3. インジケータライトは、真空圧力の強度に応じて色が変わります。(青は開始状態を示し、赤は最強状態を示します。)

このボタンを押し続けて圧力を解放します。

使用説明書

1. 製品を初めて使用する前に、充電してください。製品の充電ポートに提供されたUSB充電ケーブルを正しく挿入してください。その後、コンピューターのUSBポートまたはUSBポート付きの携帯電話充電器を使用して製品を充電できます。通常の充電中、製品のインジケータライトが点滅します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが連続して点灯します。
2. ペニスまたはシールリングの入口に水溶性潤滑剤を塗布します。
3. 勃起していないペニスをシールリングの入口から真空ポンプに挿入します。
4. 電源ボタンを2秒間長押ししてデバイスをオンにし、再度押して真空機能をオンにします。
5. 真空が始まり、軽い引っ張られる感覚が伴うことがあります。
6. ペニスが勃起したら、すぐにボタンを押して吸引を停止し、次にリリースボタンを押して圧力を放出します。

- 痛みや不快感を感じた場合は、すぐにリリースボタンを押して圧力を放出し、使用を中止してください。

清掃とお手入れ


- 使用前後に、シールリングをめるま湯と抗菌石鹸で洗浄してください。
- 乾いたタオルで優しく水分を拭き取り、自然乾燥させてください。
- 本体は防水ではありません。電動装置に水が入らないようにしてください。
- 水溶性の潤滑剤のみ使用してください。シリコン製の潤滑剤は使用しないでください。
- 清潔で涼しい場所に保管し、子供の手の届かない場所に置いてください。
- 清掃が必要な場合は、電動装置を外し、円筒とシールリングを清掃してください。

健康と安全の注意事項

- デバイスは充電中に操作しないでください。充電中に電源を入れないでください。
- 勃起を達成するために必要な最小限の真空圧を適用してください。過剰に使用すると、陰茎に傷害を与える可能性があります。
- 痛みを感じた場合は、すぐに真空ポンプの使用を中止してください。

- アルコールや薬物の影響下で使用しないでください。判断力が低下し、陰茎の損傷リスクが高まる可能性があります。
- 鎌状赤血球症、長時間の勃起歴がある場合、または大量のアスピリンや他の血液凝固剤を服用している場合は、青あざや血腫のリスクを増加させるため、このデバイスを使用しないでください。
- このデバイスの使用は、陰茎や陰嚢内の血管に擦り傷や損傷を引き起こし、青あざや出血、血腫を引き起こす可能性があります。
- デバイスの使用は、ペイロニー病（陰茎の硬化組織形成により、通常、勃起時に痛み、湾曲、ねじれが生じる）、異常な勃起（持続的で通常は性的興奮と関係のない痛みを伴う勃起）、尿道狭窄（尿道の狭窄により、排尿が困難になること）などの既存の病状を悪化させる可能性があります。
- 真空ポンプの誤った使用は、陰茎を傷つける可能性があります。
- 勃起不全の症状（性交に十分な勃起を達成できない場合）がある場合は、このデバイスを使用する前に医師に相談し、糖尿病、多発性硬化症、肝硬変、慢性腎不全、またはアルコール依存症などの一般的な潜在的な原因に関する診断の遅れを避けてください。
- 陰茎部に痛みを感じた場合は、製品を使用しないでください。
- 手の力が弱く、製品を正常に操作できない場合は、この製品を使用しないでください。

スケッチマップ

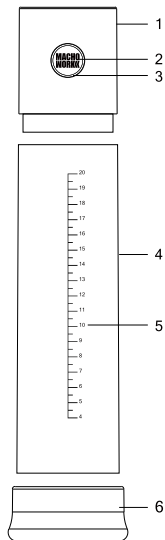

1. 電動装置


2. 電源オン/オフボタン

3. インジケータライト


4. 円筒

5. メートルスケール

6. シールリング

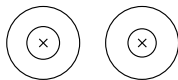 $\Phi 32\text{mm}$ $\Phi 26\text{mm}$

2種類のシールリングを装備

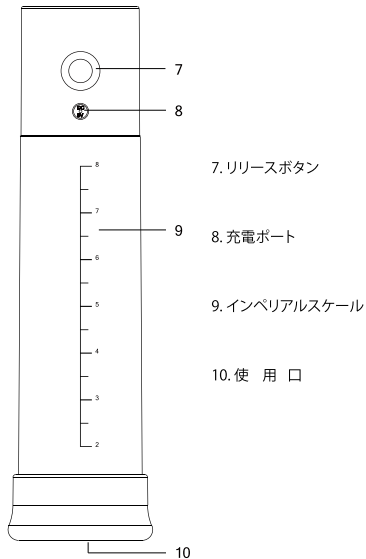

7. リリースボタン

8. 充電ポート

9. インペリアルスケール

10. 使用口

소개

MACHO WORK 1은 단계 없는 흡입 조절이 가능한 자동 음경 펌프입니다. 사용 방법: 실린더를 음경에 씌운 후 가장 낮은 설정에서 시작하세요. 최소 압력에서는 표시등이 파란색으로, 최대 압력에서는 빨간색으로 변합니다. "MACHO WORK" 버튼을 눌러 작동을 시작하고, 원하는 압력에 도달하면 버튼을 다시 눌러 일시 정지할 수 있습니다. 축적된 압력을 해제하려면 "RELEASE" 버튼을 누르세요. MACHO WORK 1은 제공된 USB 케이블로 충전이 가능하며, 전기 부문은 방수가 되지 않지만 완전히 분해하여 쉽게 세척할 수 있습니다.

포장 목록

- 1 x 페니스 펌프
- 2 x 실링 링
- 1 x 충전 케이블
- 1 x 사용 설명서

기술적인 사양

- 재료: 실리콘, ABS, GPPS
- 진공 기능: 전동
- 최대 진공 압력: -50 kPa
- 작동 전압: 3.7V
- 배터리 용량: 420mAh
- 소음: <60dB
- 지속 시간: > 60분 (완전 충전 시)

버튼 지침



1. 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.
2. 한 번 눌러 진공 기능을 활성화하거나 일시 중지합니다.
3. 인디케이터 불빛은 진공 압력 강도에 따라 색상이 변경됩니다. (파란은 시작 상태를 나타내며, 빨강은 최고 상태를 나타냅니다.)

이 버튼을 누르고 있으면 압력이 방출됩니다.

사용 설명서

1. 처음 제품을 사용하기 전에 충전해주세요. 제공된 USB 충전 케이블을 제품의 충전 포트에 올바르게 연결해주세요. 그런 다음 컴퓨터 USB 인터페이스 또는 USB 인터페이스가있는 휴대폰 충전기를 사용하여 제품을 충전할 수 있습니다. 정상 충전 중에 제품 표시등이 깜박입니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 계속 켜집니다.
2. 페니스 또는 실링 링의 입구에 수용성 윤활제를 바릅니다.
3. 발기되지 않은 페니스를 실링 링의 입구를 통해 진공 장치에 삽입합니다.
4. 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켜고, 다시 한 번 눌러 진공 기능을 활성화합니다.
5. 진공이 시작되며, 가벼운 당기는 느낌이 있을 수 있습니다.
6. 페니스가 발기되면, 즉시 버튼을 눌러 흡입을 멈추고, 리리스를 눌러 압력을 방출합니다.
7. 통증이나 불편함이 느껴지면 즉시 리리스를 눌러 압력을 방출하고 사용을 중지합니다.


청소 및 관리

1. 사용 전후로 실링 링에 따뜻한 물과 항균 비누로 세척하십시오.
2. 마른 수건으로 부드럽게 물기를 닦고 자연 건조시키십시오.
3. 본 장치는 방수 기능이 없습니다. 전기 장치에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
4. 수용성 윤활제만 사용하십시오. 실리콘 윤활제는 사용하지 마십시오.
5. 깨끗하고 서늘한 장소에 보관하고 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
6. 장치를 청소해야 할 때는 전기 장치를 분리하고 원통과 실링 링을 청소하십시오.

건강과 안전에 대한 주의사항

- 장치가 충전 중일 때는 작동하지 않습니다. 충전 중에 장치를 켜지 마십시오.
- 발기를 위해 필요한 최소한의 진공 압력만을 적용하십시오. 과도한 사용은 음경에 부상을 초래할 수 있습니다.
- 통증이 발생하면 즉시 진공 펌프 사용을 중지하십시오.
- 알코올이나 약물의 영향을 받은 상태에서 사용하지 마십시오. 이는 판단력을 손상시키고 음경에 대한 부상의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 겸상적혈구빈혈, 장시간 발기 역사 또는 아스피린이나 기타 혈액 응고 방지제를 많이 복용하는 경우, 멍이나 혈종의 위험을 증가시킬 수 있으므로 장치를 사용하지 마십시오.
- 이 장치의 사용은 음경이나 음낭 내의 혈관에 굽힘이나 손상을 일으켜 멍, 출혈 또는 혈종을 유발할 수 있습니다.
- 장치의 사용은 페이로니병(발기 시 통증, 굽힘 및 비틀림을 유발하는 음경 내 단단한 조직의 형성), 비정상적인 발기 (성적 자극과 관련 없는 지속적인 통증을 동반한 발기), 또는 요도협착증(배뇨를 어렵게 하는 요도 좁아짐)과 같은 기존의 질환을 악화시킬 수 있습니다.
- 진공 펌프를 잘못 사용하면 음경에 손상을 줄 수 있습니다.
- 발기부전 증상이 있다면(성교를 위한 충분한 발기가 이루어지지 않는 경우), 이 장치를 사용하기 전에 의사와 상담하여 당뇨병, 다발성 경화증, 간경화, 만성 신부전증 또는 알콜 중독 등 일반적인 잠재적 원인에 대한 진단 지연을 피하십시오.
- 음경 부위에 통증이 있으면 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 손의 힘이 약해 제품을 정상적으로 조작할 수 없다면 이 제품을 사용하지 마십시오.

스케치 지도

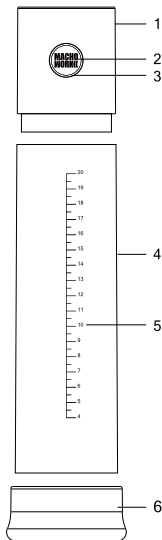

1. 전동 장치


2. 전원 버튼

3. 표시등


4. 원통

5. 미터 눈금

6. 씰링 링

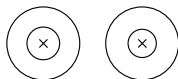 $\Phi 32\text{mm}$ $\Phi 26\text{mm}$

두 가지 크기의 씰링 링 제공

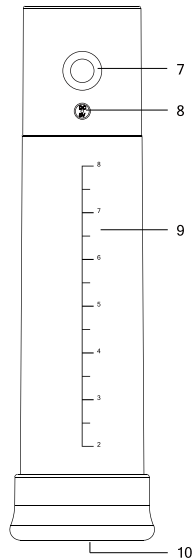

7. 방출 버튼

8. 충전 단자

9. 영국식 눈금

10. 사용 입구

Inleiding

De MACHO WORK 1 is een automatische penis-pomp met traploze zuigkrachtregeling. Om te gebruiken, plaatst u de cilinder over de penis en begint u op de laagste instelling. Het indicatielampje wordt blauw bij de laagste druk en rood bij de hoogste druk. Druk op de knop "MACHO WORK" om te beginnen, en druk nogmaals om te pauzeren zodra de gewenste druk is bereikt. Druk op de knop "RELEASE" om opgebouwde druk af te voeren.

De MACHO WORK 1 is oplaadbaar via de meegeleverde USB-kabel. Het elektrische gedeelte is niet waterdicht, maar de pomp kan volledig worden gedemonteerd voor gemakkelijke reiniging.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Penis pomp
- 2 x Dichtingsringen
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Instructies

Technische Parameters

Materialen: Silicone、ABS、GPPS

Vacuümfunctie: Elektrisch

Maximale vacuümdruk: -50 kPa

Werkspanning: 3,7V

Batterijcapaciteit: 420mAh

Geluid:<60dB

Duur: >60 minuten (bij volledig opgeladen)

Knopinstructie



1. Houd 2 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Druk eenmaal om de vacuümfunctie in te schakelen of te pauzeren.
3. Het indicatorlampje verandert van kleur op basis van de vacuümdrukintensiteit. (Blauw geeft het beginniveau aan, rood het hoogste niveau.)



Houd deze knop ingedrukt om de druk te laten ontsnappen.

Gebruiksaanwijzing

1. Voor het eerste gebruik van het product, laad het alstublieft op. Steek de meegeleverde USB-oplaadkabel correct in de oplaadpoort van het product. Vervolgens kunt u het product opladen via een USB-poort van de computer of een mobiele lader met een USB-poort. Tijdens normaal opladen knippert de productindicator om het opladen aan te geven; wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft de indicator continu branden.
2. Breng op waterbasis smeermiddel aan op de ingang van de penis of het dichtingsring.
3. Zet de slappe penis door de ingang van de dichtingsring in de vacuümpomp.
4. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals om de vacuümfunctie te activeren.
5. Het vacuüm begint, wat gepaard kan gaan met een lichte trekkerigheid.

6. Zodra de penis stijf is, druk onmiddellijk op de knop om de zuiging te stoppen, druk vervolgens de release-knop in om de druk af te laten.
7. Als er pijn of ongemak optreedt, druk dan onmiddellijk op de release-knop om de druk af te laten en stop met het gebruik van het apparaat.

Reiniging en Onderhoud


1. Reinig de dichtingsring voor en na elk gebruik met warm water en antibacteriële zeep.
2. Dep voorzichtig het vocht af met een droge handdoek en laat het op natuurlijke wijze drogen.
3. Het apparaat is niet waterdicht. Laat geen water in het elektrische apparaat komen.
4. Gebruik **alleen** wateroplosbare smeermiddelen. Gebruik geen siliconen smeermiddelen.
5. Bewaar het apparaat op een schone, koele plaats, buiten bereik van kinderen.
6. Wanneer het apparaat gereinigd moet worden, schroef dan het elektrische apparaat los en reinig de cilinder en de dichtingsring.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. Zet het apparaat niet aan tijdens het opladen.
- Breng **alleen** de minimale vacuümdruk aan die nodig is om een erectie te bereiken. Overmatig gebruik kan schade aan de penis veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de vacuümpomp als er pijn optreedt.

- Gebruik het apparaat niet onder invloed van alcohol of drugs, aangezien dit je beoordelingsvermogen kan beïnvloeden en het risico op verwondingen aan de penis kan verhogen.
- Als je sikkelcelanemie hebt, een geschiedenis van langdurige erecties, of grote hoeveelheden aspirine of andere bloedverdunders gebruikt, gebruik het apparaat dan niet om het risico op blauwe plekken en hematomen te verminderen.
- Het gebruik van dit apparaat kan schaafwonden of schade aan de bloedvaten in de penis of het scrotum veroorzaken, wat kan leiden tot blauwe plekken, bloedingen of hematomen.
- Het gebruik van dit apparaat kan bestaande aandoeningen verergeren, zoals de ziekte van Peyronie (vorming van verhard weefsel in de penis, wat meestal pijn, kromming en verdraaiing tijdens een erectie veroorzaakt), abnormale erecties (blijvende, meestal pijnlijke erecties die niet gerelateerd zijn aan seksuele opwinding) of urethrastricturen (vernauwing van de urethra die het urineren moeilijk kan maken).
- Onjuist gebruik van de vacuümpomp kan schade aan de penis veroorzaken.
- Als je symptomen van erectiestoornissen hebt, zoals het onvermogen om een erectie te krijgen die voldoende is voor geslachtsgemeenschap, raadpleeg dan een arts voordat je dit apparaat gebruikt om schadelijke vertragingen in de diagnose van veelvoorkomende oorzaken, zoals diabetes, multiple sclerose, levercirrose, chronisch nierfalen of alcoholisme, te voorkomen.
- Gebruik het product niet als je pijn ervaart in het gebied van de penis.
- Als je verminderde kracht in je handen hebt en het product niet goed kunt bedienen, gebruik het dan niet.

Schetskaart

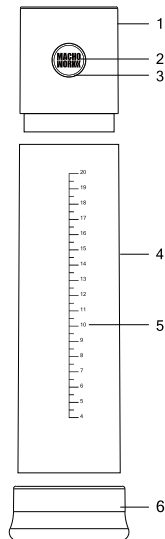

1. Elektrisch apparaat



2. In / Uit-knop

3. Indicatorlampje

4. Cilinder

5. Metrische schaal

6. Dichtring

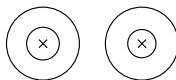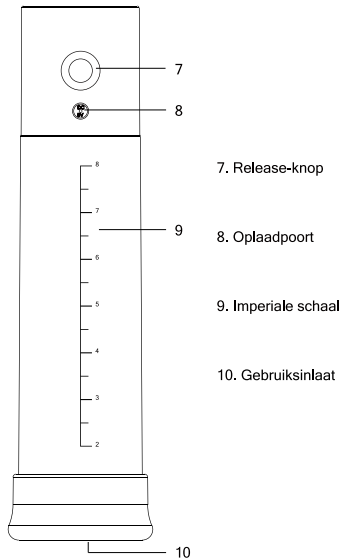 $\Phi 32\text{mm}$ $\Phi 26\text{mm}$ Uitgerust met twee
maten dichtingsringen

7. Release-knop

8. Oplaadpoort

9. Imperiale schaal

10. Gebruiksinlaat

介紹

MACHO WORK 1 是一款自動陰莖泵，具有無級吸力調節功能。使用時，將氣缸放置在陰莖上，並從最低檔開始。指示燈在最低壓力時為藍色，在最高壓力時為紅色。按下“MACHO WORK”按鈕開始使用，達到所需壓力後再次按下按鈕暫停。若需釋放積累的壓力，只需按下“RELEASE”按鈕。

MACHO WORK 1 可通過標配的USB數據線充電。注意電動部分不防水，但泵體可以完全拆解，方便清潔。

包裝清單

- 1 x 真空助勃器
- 2 x 密封圈
- 1 x USB充電線
- 1 x 說明書

技術參數

- 材 料: 矽膠, ABS, GPPS
- 抽 氣 功 能: 電動
- 氣 壓 值: -50kPa
- 工 作 電 壓: 3.7V
- 電 池 容 量: 420mAh
- 工 作 噪 音: <60dB
- 使 用 時 間: >60分鐘(滿電狀態)

按鍵說明



1. 長按兩秒打開或關閉電源。
2. 單按开启或暫停抽氣功能。
3. 指示燈光顏色隨真空負壓的強度改變。
(藍色標示開始狀態, 紅色標示最強狀態)

按住釋放按鍵可以釋放氣壓。

使用說明

1. 首次使用產品前請先充電，將配套USB充電線正確插入產品的充電孔，使用電腦USB接口或帶USB接口的手機充電器為產品充電。正常充電時，產品指示燈會閃爍提示；當電池充滿時，指示燈會長亮。
2. 在陰莖或密封圈的使用入口處塗抹水溶性潤滑劑。
3. 將未充分勃起的陰莖通過密封圈的使用入口插入真空助勃器內。
4. 長按兩秒開機按鍵打開電源，再次單按可開啓抽氣功能。
5. 開始抽吸，可能伴隨輕微拉扯感。
6. 陰莖勃起後，立即按下按鈕停止抽氣，再按住釋放按鍵釋放氣壓。
7. 如果出現疼痛或不適，請立即按住釋放按鍵釋放氣壓，並停止使用。


清潔護理

1. 每次使用前后，請用溫水和除菌香皂清潔密封圈。
2. 用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
3. 設備不防水，請勿讓水滲入電動裝置。
4. 僅限使用水溶性潤滑劑，不可使用硅潤滑劑。
5. 請安放在清潔、陰涼處，並避免兒童接觸。
6. 當設備需清洗時，可拧下電動裝置，對圓筒和密封圈進行清潔。


健康與安全預防措施

- 設備充電時不可運作，請勿在充電期間開機。
- 僅施加實現勃起所需的最小真空壓力，過度使用可能會傷害陰莖。
- 如果出現疼痛，請停止使用真空助勃器。
- 請勿在酒精或藥物的作用下使用，可能損害用戶判斷力並增加陰莖受傷的風險。
- 如果您患有鐮狀細胞性貧血、有長時間勃起史，或服用大量阿司匹林、其他血液稀釋劑藥物時，請勿使用，避免增加瘀傷和血腫的風險。
- 使用該裝置可能會擦傷或損害陰莖或陰囊內的血管，導致瘀點、出血或形成血腫。
- 使用該設備可能會加重已經存在的佩羅尼氏病（陰莖硬化組織的形成，通常在勃起期間導致疼痛、彎曲和扭曲）、陰莖異常勃起（持續性，通常由於疾病引起的陰莖勃起疼痛，與性喚起無關）、和尿道狹窄（尿道狹窄是使尿道變窄的硬化組織區域，有時使排尿困難）等疾病。
- 錯誤使用真空助勃器會損傷陰莖。
- 如果您有勃起功能障礙的症狀，即無法達到足以進行性交的勃起，請在使用此設備之前諮詢您的醫生，以避免在診斷這種情況的任何最常見原因時造成潛在的有害延誤，例如如糖尿病、多發性硬化、肝硬化、慢性腎功能衰竭或酗酒。
- 如果您的陰莖區域有疼痛感，請勿使用該產品。
- 如果您的手力減弱，不能正常操控該產品，請勿使用該產品。

示意圖

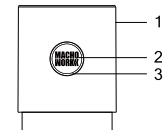

1. 電動裝置
2. 開/關機按鍵

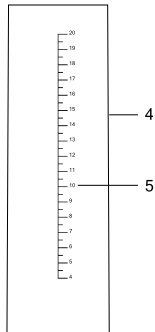


3. 指示燈

4. 圓筒

5. 公製標尺



6. 密封圈

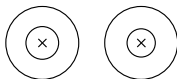

Φ32mm

Φ26mm

配備兩種尺寸的密封圈

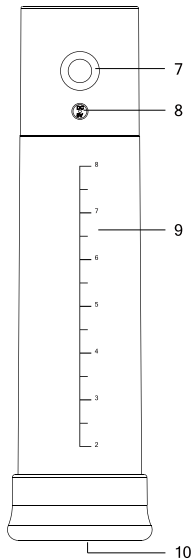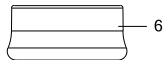

7. 釋放按鍵

8. 充電插孔

9. 英制標尺

10. 使用入口